



Instructions For Use




PUR-Blue™ DUO Swab Sampler Device

Watch Demonstration Video


<http://www.worldbioproducts.com/demo.html>

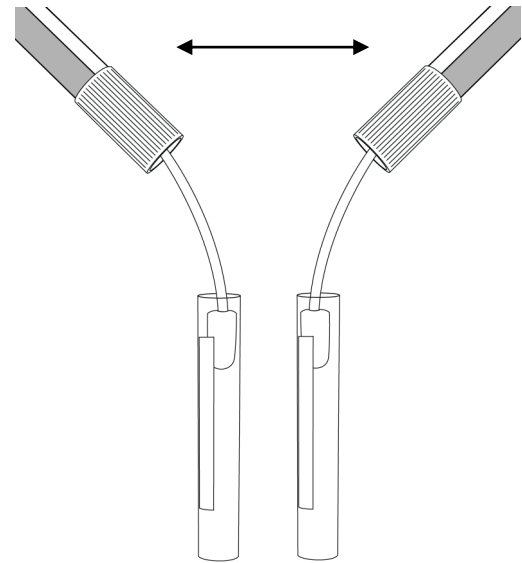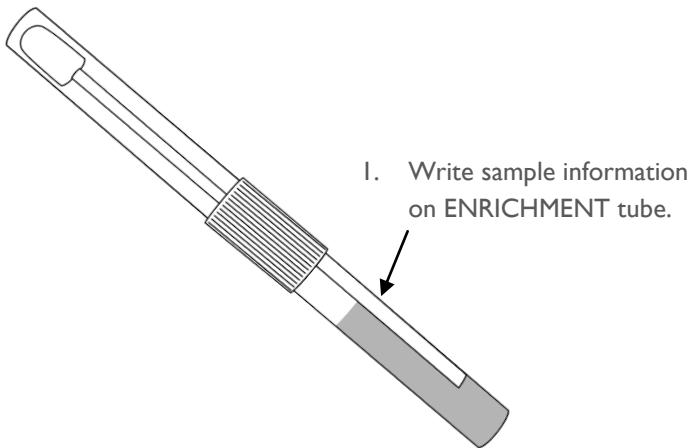


2. Unscrew cap from the swab tube. Press each side of the swab tip against the inside of the tube to remove excess media.

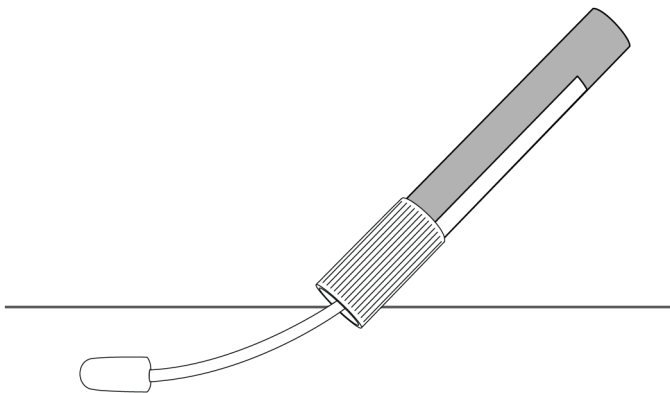


3. Press down firmly against surface to ensure the swab tip makes full contact with the sample surface.

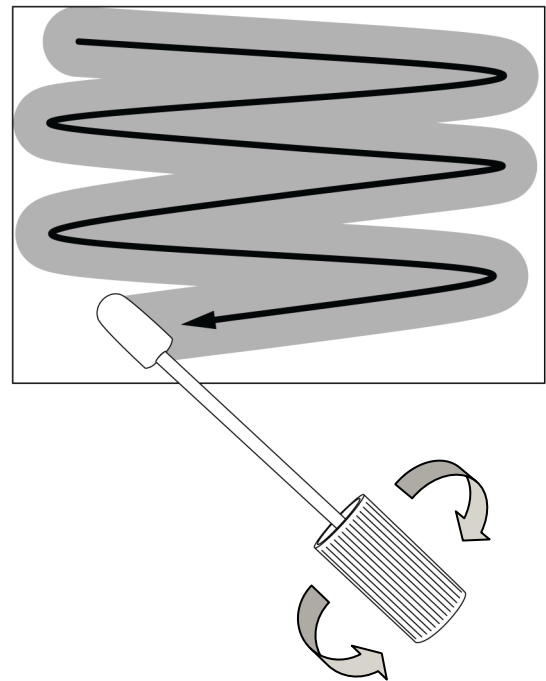


4. Vigorously scrub back and forth across the surface, while rotating the swab to ensure entire swab tip makes contact with the surface.

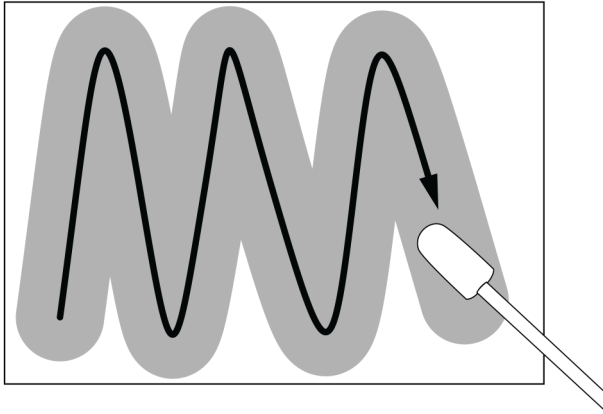


5. Change direction 90° and repeat process.

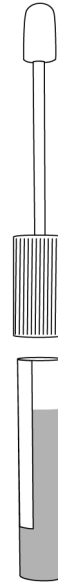

6. Unscrew swab from the ENRICHMENT tube.

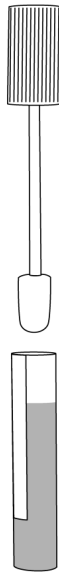

7. Flip the swab over and insert into ENRICHMENT tube.
Securely tighten cap.

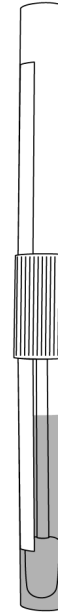

8. Reattach empty tube to the enrichment tube.
Send ENRICHMENT tube with swab to laboratory for analysis.

Limitation of Liability:

World Bioproducts LLC shall not be liable for any special or consequential damages that result from the use of, or the inability to use, these materials or the performance of the products, even if World Bioproducts LLC has been advised of the possibility of such damages. Applicable law may not allow the limitation of exclusion of liability or incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

For In-Vitro Use Only

Safety Data Sheets & Certificates of Analysis available upon request.

Refer to package label for storage information.

World Bioproducts, LLC
 Call 877-260-6441 / Mail PO Box 947, Bothell, WA 98041
 Email orders@worldbioproducts.net / Visit www.worldbioproducts.com








Instrucciones de uso

PUR-Blue™ DUO Dispositivo de muestreo de hisopos


Mire el video de demostración

<http://www.worldbioproducts.com/demo.html>

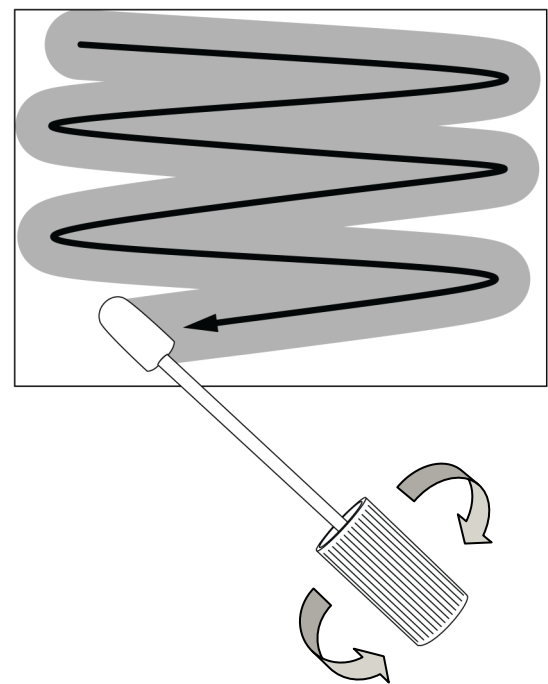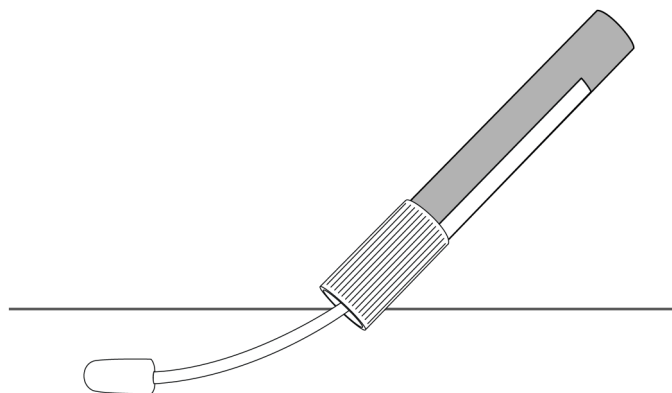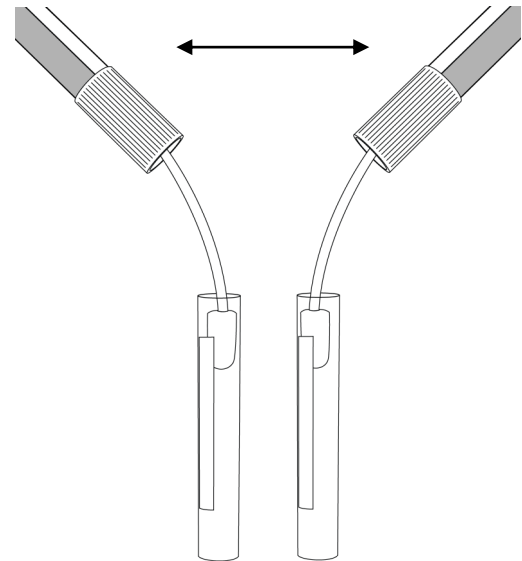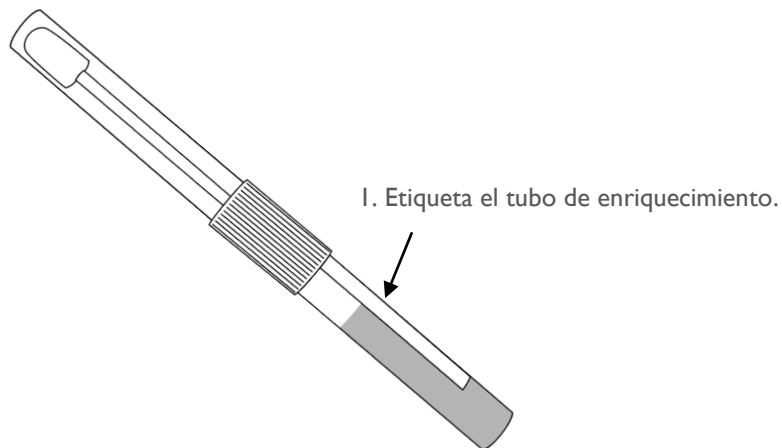


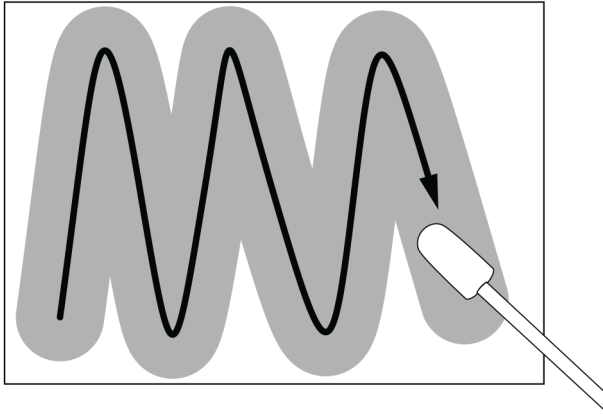


5. Cambie la dirección 90 ° y repita el proceso.

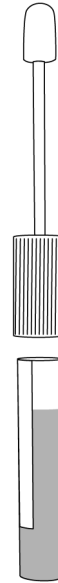

6. Desenrosque el hisopo del tubo de ENRIQUECIMIENTO.

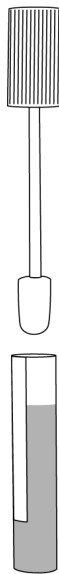

7. Voltee el hisopo e insértelo en el tubo de ENRIQUECIMIENTO. Apriete firmemente la tapa.

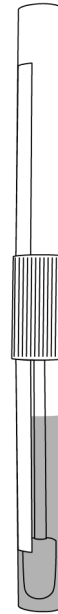

8. Conecte el tubo vacío al tubo de enriquecimiento. Enviar el tubo de ENRIQUECIMIENTO con hisopo al laboratorio para su análisis.

Limitación de responsabilidad

World Bioproducts LLC no será responsable de ningún daño especial o consecuente que resulte del uso o la imposibilidad de uso de estos materiales o el rendimiento de los productos, incluso si se ha informado a World Bioproducts LLC de la posibilidad de dichos daños. La ley aplicable puede no permitir la limitación de la exclusión de responsabilidad o daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse a usted.

Para uso in vitro solamente

Hojas de datos de seguridad y certificados de análisis disponibles a petición

Consulte la etiqueta del paquete para obtener información de almacenamiento

World Bioproducts, LLC
Call 877-260-6441 / Mail PO Box 947, Bothell, WA 98041
Email orders@worldbioproducts.net / Visit www.worldbioproducts.com

